


Mediacel

Gebruiksdoel

- Voor de op de vloer staande media naar:
 - Wandtafels
 - Eilandtafels
 - Laboratoriumapparaten op roltafels of onderbouwconstructies
 - Op de vloer staande laboratoriumapparaten
- Uitvoeringsvarianten voor geventileerde doeleinden
- Modulaire bevestiging van aanbouwcomponenten aan de functiestandaard zoals planchetten van glas en gemelamineerde OSB-plaat, hangkasten, statiefhouders enz.
- Montage zonder gereedschap van extra componenten van het mediakanaal zoals afdruiptrekken, monitorsteunen, pipethouders, legplankjes enz.


Opbouw

Mediacel voor wandtafel

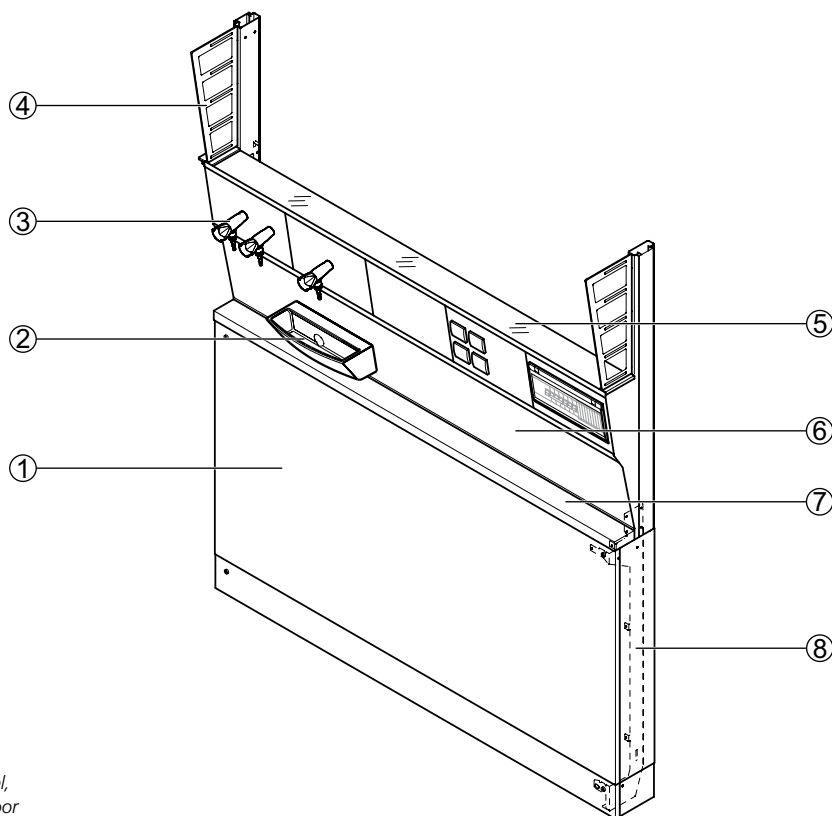


- 1 Installatiepaneel
- 2 Trechterbak
- 3 Mediapaneel met armaturen
- 4 Wang voor accessoires van de unit
- 5 Mediakanaal met mediapaneel, glazen planchet en klemrail voor accessoires
- 6 Afdekpaneel voor mediacel
- 7 Console
- 8 Functiekolom


**Mediacel voor wandtafel
met console en 2 glazen planchetten,
werkhogte 900 mm**

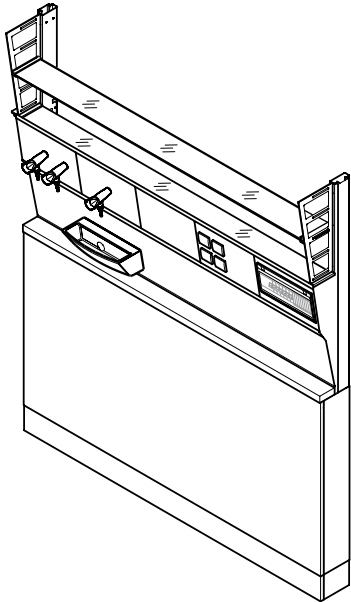


**Mediacel voor wandtafel
met tafelonderstel met C-voet,
onderbouwen op wielen en hangkast,
werkhogte 750 mm**

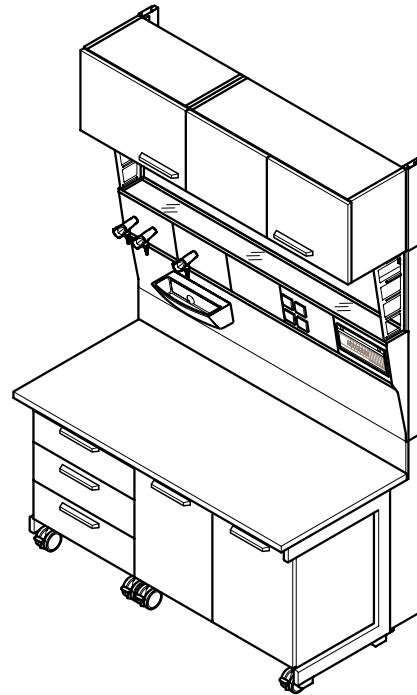

**Mediacel voor wandtafel
met onderbouw op plint en
media van boven,
werkhogte 900 mm**

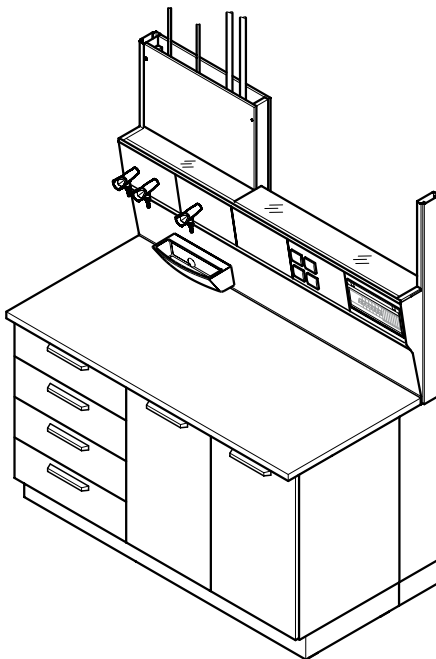


**Mediacel voor eilandtafel
met onderbouw op plint en
media van boven,
werkhogte 900 mm**

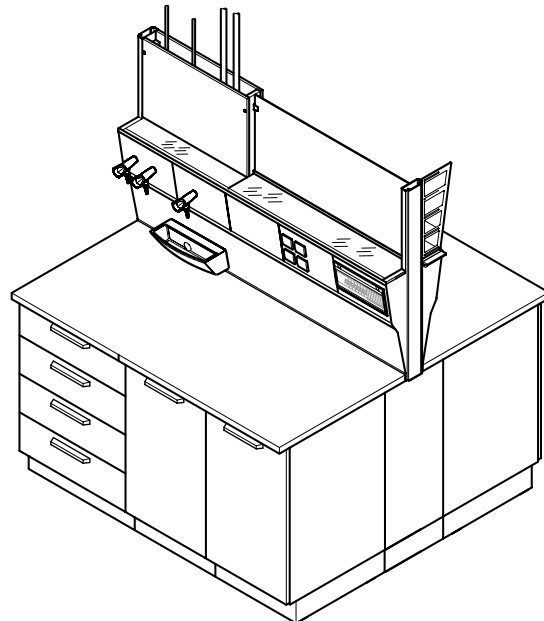


Mediacel

Mediacel voor eilandtafel
met 4-voet tafelonderstel,
onderbouw op wielen en hangkast,
werkhoogte 900 mm

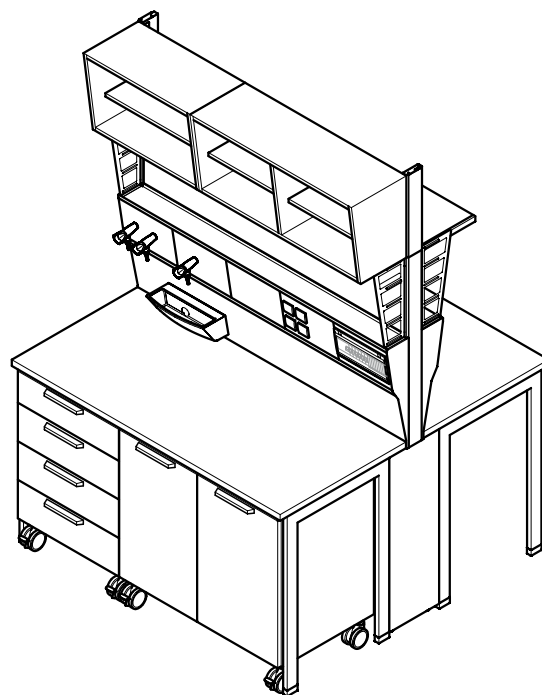

Maattekening

Mediacel voor wandtafel/eilandtafel

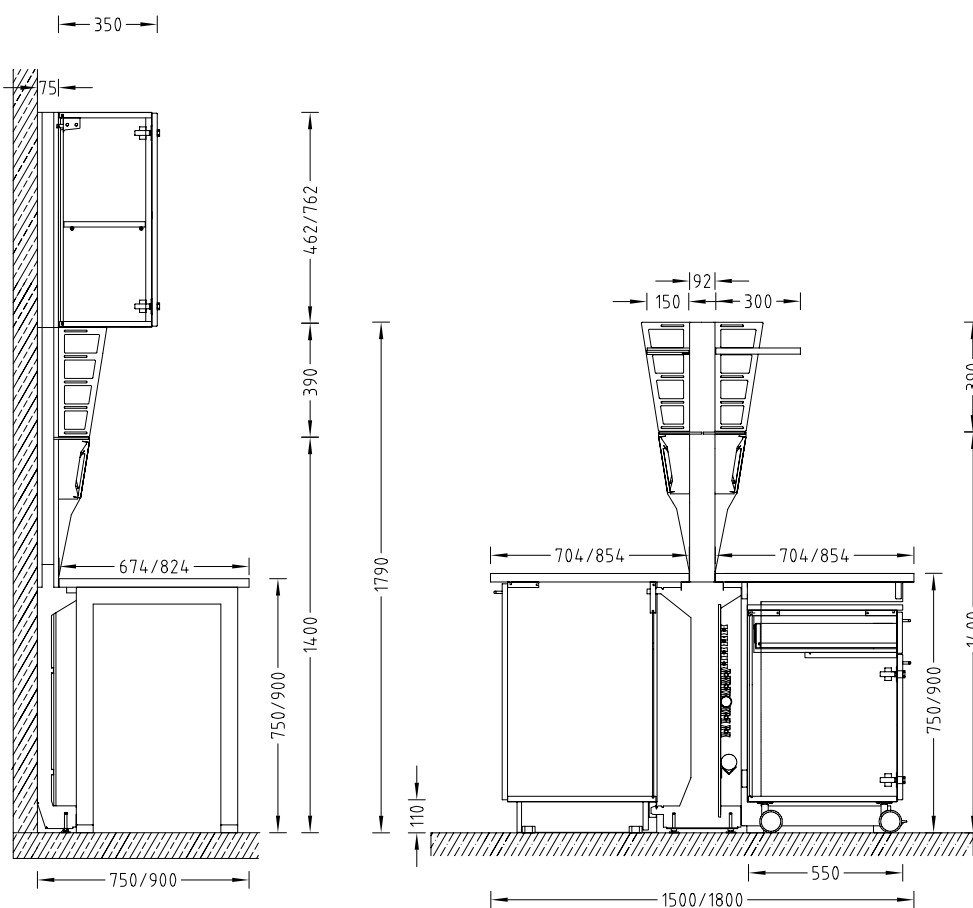

Technische gegevens

Afmetingen					
Breedte [mm]	600	900	1200	1500	1800
Diepte mediacel voor wandtafel [mm] (incl. wandtafel)	75 (750/900)				
Diepte mediacel voor eilandtafel [mm] (incl. eilandtafel)	92 (1500/1800)				
Hoogte [mm]	1790				
Werkhoogte [mm]	750 900				
Hoogte staanderverlenging [mm] voor hangkast hoogte 460 mm	462				
Hoogte staanderverlenging [mm] voor hangkast hoogte 760 mm	762				
Hoogte staanderverlenging [mm] tot plafondhoogte 3500 mm	Afhankelijk van plafondhoogte				
Mediapaneel breedte x hoogte [mm]	300 x 200				
Glazen planchet breedte x diepte [mm]	Breedte mediacel x 150				
Planchet van een gemelamineerde OSB-plaat breedte x diepte [mm]	Breedte mediacel x 300				

Draagvermogen	
Glazen planchet [kg]	20
Dragerpaneel uit gemelamineerde OSB-plaat [kg]	30
Statiefhouder [kg]	5

Kenmerken	
Modulaire opbouw	Voor wandtafels eenzijdig, voor eilandtafels tweezijdig uitbreidbaar Functiekolom met mediakanaal verlengbaar, bijv. voor hangkasten Werkblad, console en onderbouw vervangbaar zonder demontage van de installaties Rasteronafhankelijke montage van toebehoren
Statiefhouder \varnothing [mm]	12 tot 13
Aantal mediapanelen	Afhankelijk van de breedte van het mediakanaal

Elektrotechniek	
Stroomvoorziening	Contactdozen in het mediapaneel
Verdeelinrichting	Optioneel

Sanitaire techniek	
Sanitaire voorziening	Mediapaneel met armaturen voor vacuüm, gassen en/of water Geleiding voor toevoeringen onder het werkblad of onder de console